


Instrukshon di uzo

Den e instrukshon di uzo akí ta deskribí paso a paso kon bo ta hasi e tèst di shushi bon.

Pone un tiki shushi na e palu fini di skèrf manera skruf. Si tin demasido shushi e ta pone ku no por uza e tèst.

Loke bo mester sa promé


- Bo por uza e tubu chikí un biaha so.
- Manda e tubu chikí i e formulario di kontesta den e ènvelòp pa manda bèk.
- E tubu chikí ta solamente pa e hende ku a haña invitashon pa e investigashon akí.
- Te na momento ku bo uza e tubu chikí e tubu chikí no tin mag di ta mas friu ku 2 grado i no mas kayente ku 30 grado.
- Bo por pòst e ènvelòp djaluna, djamars, djárason i djaweps i djabièrnè promé ku 17:00 or. Di djabièrnè anochi te djadumingu anochi nan no ta saka pòst for di brivenbùs. No pòst e ènvelòp tampoko algu promé ku un dia di fiesta.

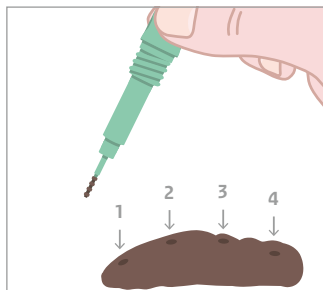


Importante

- Mester di masha tiki shushi pa por hasi e tèst bon
- Bo shushi no tin mag di drehta den kontakto ku urina òf ku awa.
- Bon tin mag di drai solamente na e dòpi bèrdè.

Kon bo ta hasi e tèst?

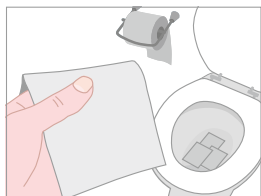


- 1 Importante: bo shushi *no tin mag* di drehta den kontakto ku urina òf ku awa ku tin den wese . P’esei bo tin di pone bastante vèl di papel di wese den e pòchi.

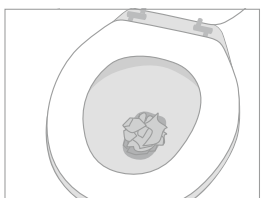


- 2 Bo por uza un pròp di papel di wese tambe.




- 3 Bai wese i sòru pa bo shushi kai riba e papel.

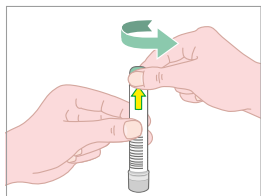


- 4 Dra i **dòpi bèrdè** lòs e. Na e dòpi tin un palu finì, na fin e ta di skèrf manera un skruf.

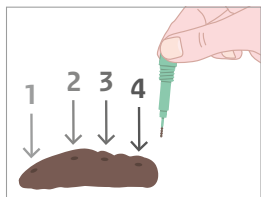


- 5 Ku e parti di skèrf manera skruf bo ta prek na kuater lugá diferente den bo shushi pa e tèst. Ta djis un tiki shushi por keda pegá na e parti di skèrf manera un skruf

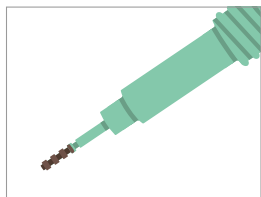


- 6 Pa por hasi e tèst bon, ta bastante si djis un tiki shushi keda pegá na e parti di skèrf manera skruf. Paga tinu: **Si pone demasiado shushi den e tubu, no por uz'é mas.**

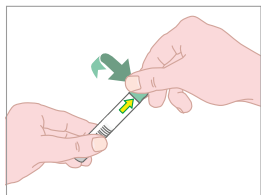


- 7 Pone e palu finí bèk den e tubu chikí i bolbe pone e dòpi bèrdè ariba. E palu ta bai den e parti di e tubu chikí ku líkido aden. E líkido por bira un tiki trubel. Esei ta normal.

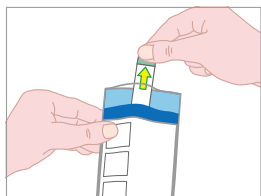

- 8 Pone e tubu chikí den e saku ku bo a haña aserka. Esaki ta e saku blanku ku un rant blou.

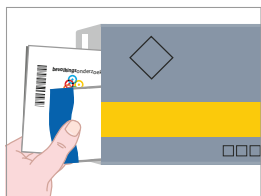

- 9 Yena e formulario di kontesta. Menshoná ta riba ki fecha bo a pone shushi den e tubu chikí. Pone e saku i e formulario di kontesta den e ènvelop koló shinishi pa manda bèk. Warda e ènvelòp pa manda bèk den frishidèr te ora ku bo ta pòst e den brivenbùs.

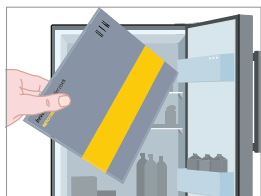

- 10 Warda e ènvelòp pa manda bèk den frishidèr te ora ku bo ta pòst e den brivenbùs.



- 11 Pòst e tubu chikí i e ènvelòp pa manda bèk **denter di 24 ora.** Bo no tin nodi di plak stampa

Kontesta riba pregunta masha hasí

Te ki dia mi por uza e tubu chikí?

Ta indiká e fecha di vensementu di e tubu chikí riba dje (aña, luna).

Mi tin ku pòst e tubu chikí djaluna, djamars, djárason, djaweps òf djabièrnè promé ku 17:00 or. Pakiko esei ta?

Riba e dianan ei e tempu entre pòstmentu di e tubu chikí i su yegada na laboratorio ta mas kòrtiku posibel. Mas lihé nan por hasi e investigashon den laboratorio, mas mihó. Si bo pòst e tubu chikí djabièrnè anochi, djasabra òf djadumingu e ta yega djamars numa na laboratorio.

Mi a pèrdè e tubu chikí/e tubu chikí ta dañá?

Si bo a pèrdè e tubu chikí òf si por ehèmpel e líkido a drenta den e tubu chikí sin ku esei tabata e intenshon, bo por pidi un tubu chikí nobo. Bo por yama e liña di informashon di e organisashon ku ta laga hasi e tèst .

Algu a bai robes. Kiko mi por hasi awor?

Algu a bai robes ku e tubu chikí òf kohementu di shushi? Yama e liña di informashon di e organisashon ku ta laga hasi e tèst e ora ei

Pakiko mi mester warda e tubu ku shushi den frishidèr te ora ku mi pòst e?

Si tin sanger den bo shushi, ta mas fásil pa komprobá esei durante e investigashon na laboratorio, si bo ward'é friu den frishidèr.

Unda mi por akudí pa mas informashon?

- Riba e wèpsait tin un sine kon ta e forma korekto pa bo pone shushi den e tubu chikí. Bo ta haña kontesta tambe riba pregunta ku hende ta hasi masha hopi biaha.
- Yama e liña di informashon di e organisashon ku ta hasi e investigashon. Bo ta haña e number di telefon i wèpsait di e organisashon den bo área den e karta òf via www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl.



Fabrikante di tubu chikí : Sentinel CH, SpA.
Via Robert Koch, 2
20152 - Milano - Italy
lea_1156103-2.0/31